


Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinaröt, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens armbåge vid nervinklämning, efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförlitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Applicering

1. Öppna kardborrbanden, placera armbågen i ortosen. Bild 1
 2. Dra bandet så att det omsluter armbågen. Stäng kardborrbandet. Bild 2
 3. Vid behov av stabilare stöd, placera förstärkningen längs med armen i nivå med armvecket. Bild 3
 4. Linda resterande del av bandet runt armbågen och stäng kardborren. Bild 4
- När önskat omfång av ortosen har uppnåtts kan ortosen dras av och på utan att öppnas.

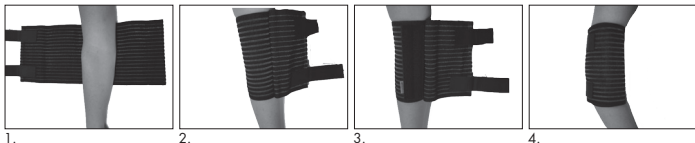

Justera kardborrbanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Polyester, elasthan, nylon. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden och ta bort skenfickan. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Storlek

Modell	Bredd	Längd
Short	19 cm	50 cm
Long	25 cm	60 cm

Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örskroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Instruction for use – Elbowstrap


Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

Area of use

The brace supports and relieves the users elbow when the cause is nerve entrapment, after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or overuse problems. The brace can also be used for preventive purposes in heavy or repetitive movements.

Application

1. Open the hook and loop straps, place the elbow on the brace. Picture 1
 2. Pull the strap so that it encloses the elbow. Close the hook and loop straps. Picture 2
 3. In need of a more stable support, place the rail pocket along the arm. Picture 3
 4. Wrap the remaining part of the band around the elbow and close the hook and loop straps. Picture 4
- When the desired scope of the brace has been achieved it can be pulled on and off without being opened.

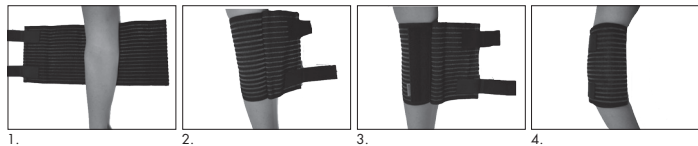

Adjust the hook and loop straps when necessary. It is important that the brace fits comfortably, without pinching, chafing or affecting blood circulation.

Material

Polyester, elastane, nylon. Free from latex.

Washing instructions

Close the hook and loop straps and remove the rail pocket. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



Size

Model	Width	Length
Short	19 cm	50 cm
Long	25 cm	60 cm

The product is bilateral. Single patient use.

Recycling

If the product has a removable splint, take it out and sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se