


Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens hand och handled efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Applicering

1. Öppna de två kardborrbanden. Placera handen i ortosen. Bild 1. Observera att bilden visar höger hand. För applicering på vänster hand, rotera ortosen 180° och följ därefter instruktionerna nedan.
2. Knäpp samtliga kardborrband så att dess hårda och mjuka del täcker varandra och ortosen sitter behagligt. Bild 2, 3 och 4.

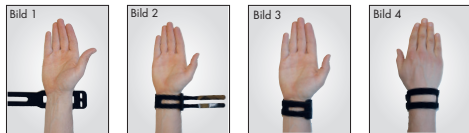

Ortosen kan behöva justeras med jämna mellanrum beroende på vilka situationer den används i. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Neopren: syntetiskt gummi, polyamid. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Måttabell

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient. Om produkten innehåller neopren rekommenderas användning max 4 timmar åt gången.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.

Instruction for use – Smart Strap


Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

Area of use

The brace supports the users hand and wrist after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or over-use problems. The brace can also be used for preventive purposes in heavy or repetitive movements.

Application

1. Open the two hook and loop straps. Place your hand in the brace. Picture 1. Note that the picture shows right hand. For application on the left hand, rotate the brace 180° and follow the instructions below.
2. Close all hook and loop straps so that they overlap each other and the brace fits comfortably. Picture 2, 3 and 4.

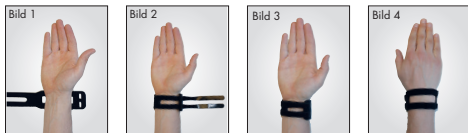

When necessary adjust the brace. It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affecting blood circulation.

Material

Neoprene: synthetic rubber, polyamide. Free from latex.

Washing instructions

Close the hook and loop straps. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



Size

One size. The product is bilateral.

Single patient use. If the product contains neoprene, use is recommended for maximum 4 hours at a time.

Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.